


LE ROTEM POUR LES NULS

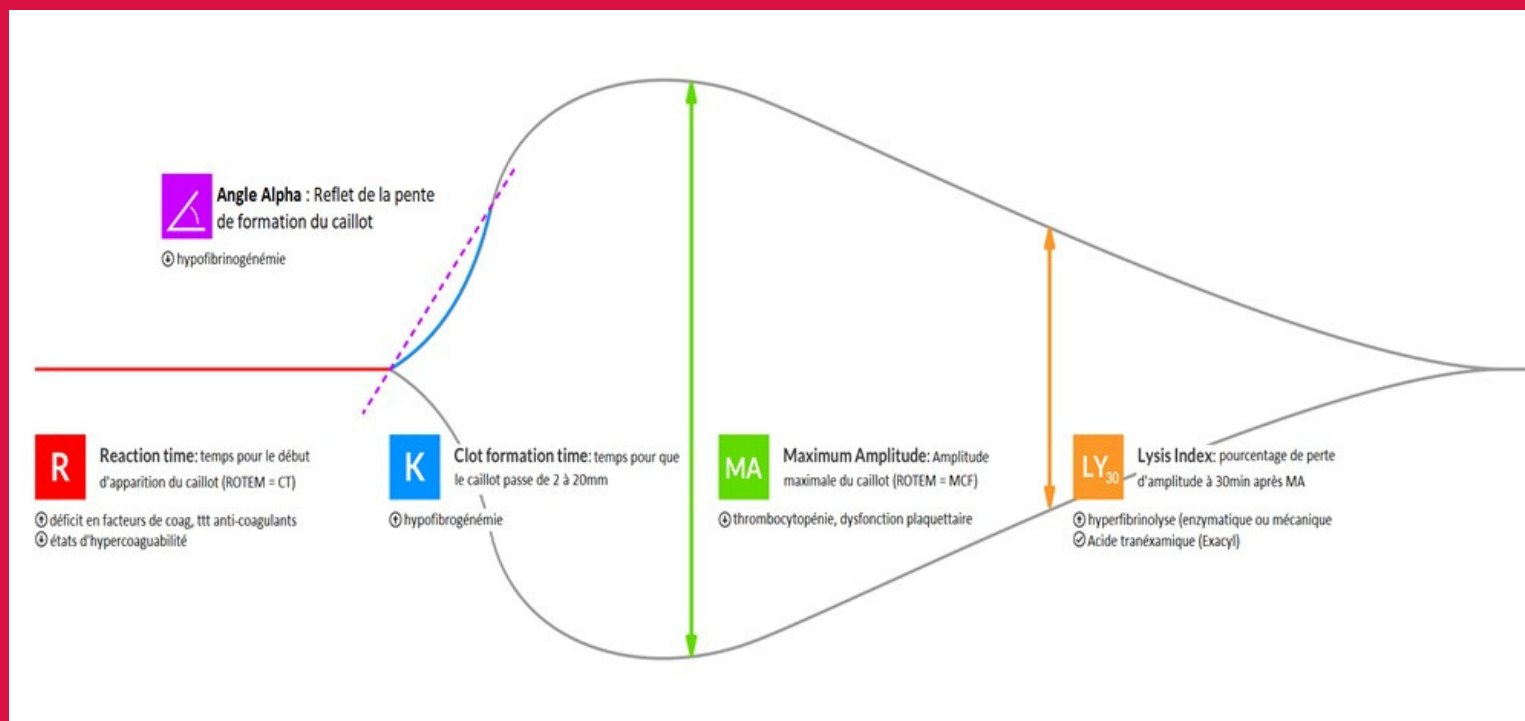

5 paramètres : "R", "angle α ", "K", "MA" et "LY30"

ASPECT NORMAL

- R = temps de réaction d'apparition du caillot
- Angle α = pente de formation du caillot
- K = temps pour que le caillot passe de 2 à 20mm
- MA = amplitude maximale du caillot
- LY30 = pourcentage de perte d'amplitude à T+30min après MA

TRAITEMENT PAR ANTICOAGULANT

- Allongement du R et du K
- Diminution de l'angle alpha

TRAITEMENT PAR ANTIAGGREGANT

- R normal
- K diminué
- MA diminué

HYPERCOAGUABILITE

- R diminué
- K diminué
- MA augmenté

FIBRINOLYSE

- R diminué
- K diminué
- MA augmenté

CIVD

PHASE AIGUE

- R et K diminués
- MA augmenté
- LY30 augmenté

PHASE TARDIVE

- R et K augmentés
- MA diminué